

ARMOIRES LABORATOIRE +5°C

LFKU 1610 - 141 L - Porte pleine - référence 638698

LFKU 1613 - 141 L - Porte vitrée - référence 638699



LFKU 1610

LES PLUS PRODUITS




Régulation électronique
Comfort + (voir détail).



Passage de cuve diamètre
30 mm pour caractérisation
et qualification sur site.
Positionné sur le côté droit à
1/3 du haut.



Passage cuve Ø 15 mm
pour sonde GTC (Gestion
Température Centralisée) -
PT100 ou numérique.

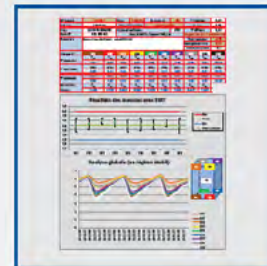

Chaque appareil est livré
avec sa cartographie de
contrôle et réglage 9 points.
Caractérisation effectuée
d'après la norme FD X15-140
en température d'air pour une
ambiance de 22°C.

DÉFINITION

- Refroidissement ventilé +5°C ± 3°C
- Dégivrage et évaporation des condensats automatique
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis
- Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 55mm
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte
- Rappel de porte automatique
- Éclairage LED sur modèle avec porte vitrée
- Équipée de 3 grilles acier plastifié (478x420 mm), charge max 45kg, réglables en hauteur par pas de 32 mm

RÉGULATION

- Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de 0,1 °C
- Verrouillage du clavier sécurisé par code PIN
- Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables)
- Alarme ouverture de porte visuelle et sonore
- Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance
- Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec indication de la date de l'heure et de la durée
- Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec indication de la date de l'heure et de la durée
- Sauvegarde de la température mini et maxi
- Connexion série RS 485 pour traçabilité température et alarmes centralisée sur PC (via interface & logiciel en accessoire)
- Thermostat de sécurité anti-congélation à +2°C



ARMOIRES LABORATOIRE +5°C - SUITE

Caractéristiques Standard


OPTIONS

- 626792: réglage de la température de consigne à +4°C ± 2°C
- 626791: réglage de la température de consigne à +6°C ± 2°C
- 626790: alarme + traçabilité autonome dans boîtier monté sur le dessus de l'appareil - (lxpxh) 150x60x100mm
- 626785: enregistreur à disques 7 jours monté dans boîtier laissé en attente avec câble 1,5m. - (lxpxh) 240x90x160mm


ACCESSOIRES

- Grille acier plastifié (lxp) 478x420 mm
- Tiroir aluminium télescopique
- Interface connexion RS485 + logiciel traçabilité
- Enregistreur mobile EJ 32 IN

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

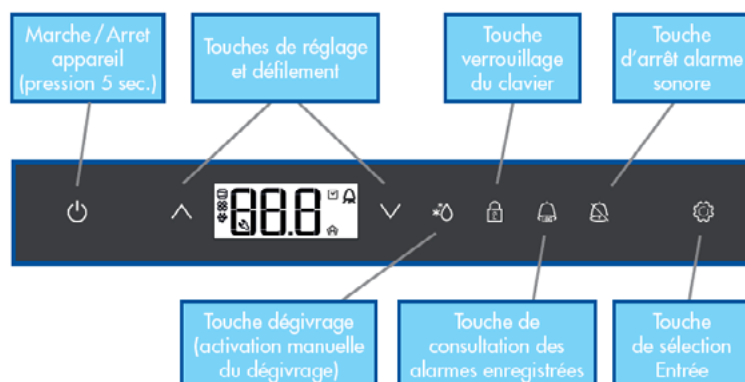

ERGONOMIE

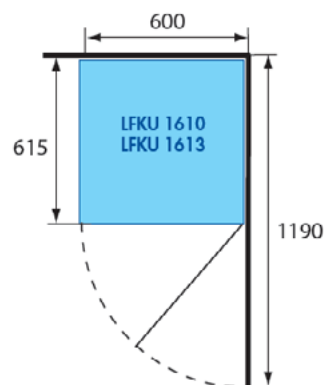

- Hauteur 820 mm - peut se placer sous paillasse
- Largeur réduite 600 mm
- Porte pleine ou vitrée, réversible avec serrure
- Rappel automatique à 45°, stable à 90°

Caractéristiques Technique

	638698	638699
Volume brut / utile (l.)	141/130	141/130
Homogénéité de la température ¹	+ 5°C ± 3°C	+ 5°C ± 3°C
Plage de réglage de la température	+ 3° à + 16°C	+ 3° à + 16°C
Résolution et réglage	0,1°C	0,1°C
Hygrométrie (%)	65-75	65-75
Refroidissement	ventilé	ventilé
Dégivrage	automatique	automatique
Évaporateur	arrière vertical	arrière vertical
Condenseur	statique	statique
Fluide	R600a	R600a
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	100	100
Consommation électrique (kWh/24h)	0,75	1,01
Dégagement calorifique (W/h)	170	200
Classe climatique	7 (+35°C)	7 (+35°C)
Niveau sonore (dBA)	47	47
Équipement		
Type	Grille acier plastifié	Grille acier plastifié
Nb/dimensions (lxp) (mm)	3 / 478x420	3/478x420
Nb max./Hauteur de réglage (mm)	11/32	11/32
Charge admissible par grille (kg)	45	45
Charge admissible par appareil (kg)	140	140
Dimensions / Poids		
Appareil (lxpxh) (mm)	600x615x820	600x615x820
Cuve (lxpxh) (mm)	440x435x670	440x435x670
Emballé (lxpxh) (mm)	614x709x905	614x709x905
Poids brut/net (kg)	39/37	46/43

ARMOIRES LABORATOIRE +5°C

LFKv 3910 - 360 L - porte pleine - référence 638702

LFKv 3913 - 360 L - porte vitrée - référence 638700



LFKv 3913

LES PLUS PRODUITS




Régulation électronique
Comfort + (voir détail).



Passage de cuve diamètre
30 mm pour caractérisation
et qualification sur site.
Positionné sur le côté droit à
1/3 du haut.



Passage cuve Ø 15 mm
pour sonde GTC (Gestion
Température Centralisée) -
PT100 ou numérique.

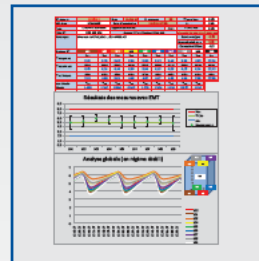

Chaque appareil est livré
avec sa cartographie de
contrôle et réglage 9 points.
Caractérisation effectuée
d'après la norme FD X15-140
en température d'air pour une
ambiance de 22°C.

DÉFINITION

- Refroidissement ventilé +5°C ± 3°C
- Dégivrage et évaporation des condensats automatique
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis
- Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 55mm
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte
- Rappel de porte automatique
- Éclairage LED sur modèle avec porte vitrée
- Équipée de 5 grilles acier plastifié (478x420 mm), charge max 45kg, réglables en hauteur par pas de 32 mm

RÉGULATION

- Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de 0,1 °C
- Verrouillage du clavier sécurisé par code PIN
- Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables)
- Alarme ouverture de porte visuelle et sonore
- Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance
- Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec indication de la date de l'heure et de la durée
- Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec indication de la date de l'heure et de la durée
- Sauvegarde de la température mini et maxi
- Connexion série RS 485 pour traçabilité température et alarmes centralisée sur PC (via interface & logiciel en accessoire)
- Thermostat de sécurité anti-congélation à +2°C



ARMOIRES LABORATOIRE +5°C - SUITE

Caractéristiques Standard


OPTIONS

- 626790 : alarme + traçabilité autonome dans boîtier monté sur le dessus de l'appareil - (lpxh) 150x60x100mm
- 626785 : enregistreur à disques 7 jours monté dans boîtier laissé en attente avec câble 1,5m. - (lpxh) 240x90x160mm


ACCESSOIRES

- Grille acier plastifié (lpxh) 478x420mm
- Tiroir aluminium télescopique
- Interface connexion RS485 + logiciel traçabilité
- Enregistreur mobile EJ 32 IN

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

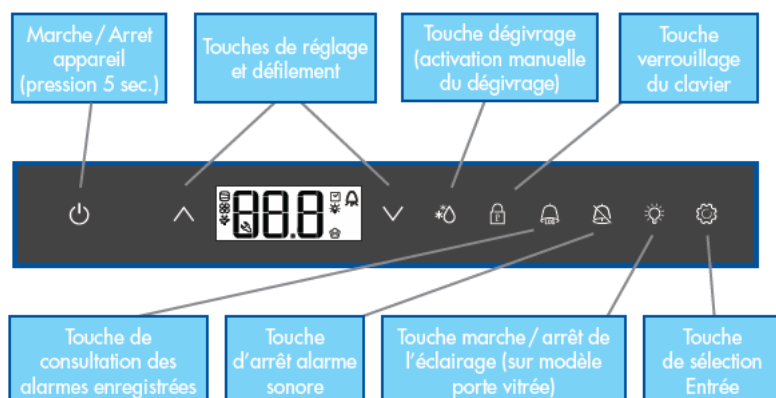

ERGONOMIE

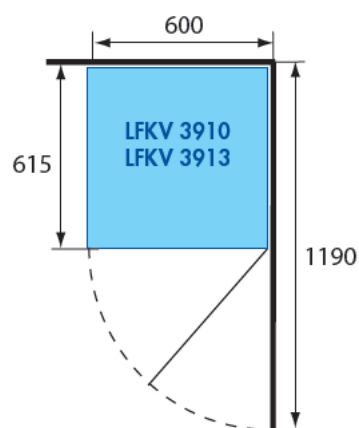

- Largeur réduite 600 mm
- Porte pleine ou vitrée, réversible avec serrure
- Rappel automatique à 45°, stable à 90°

Caractéristiques Technique

	638702	638700
Volume brut / utile (l.)	360/344	360/344
Homogénéité de la température ¹	+ 5°C ± 3°C	+ 5°C ± 3°C
Plage de réglage de la température	+ 3° à + 16°C	+ 3° à + 16°C
Résolution et réglage	0,1°C	0,1°C
Hygrométrie (%)	65-75	65-75
Refroidissement	ventilé	ventilé
Dégivrage	automatique	automatique
Évaporateur	arrière vertical	arrière vertical
Condenseur	statique	statique
Fluide	R600a	R600a
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	130	150
Consommation électrique (kWh/24h)	0,85	1,32
Dégagement calorifique (W/h)	230	270
Classe climatique	7 (+35°C)	7 (+35°C)
Niveau sonore (dBA)	48	48
Équipement		
Type	Grille acier plastifié	Grille acier plastifié
Nb/dimensions (lpx) (mm)	5 / 478x420	5 / 478x420
Nb max./Hauteur de réglage (mm)	37 / 32	37 / 32
Charge admissible par grille (kg)	45	45
Charge admissible par appareil (kg)	210	210
Dimensions / Poids		
Appareil (lpxh) (mm)	600x615x1840	600x615x1840
Cuve (lpxh) (mm)	440x435x1635	440x435x1635
Emballé (lpxh) (mm)	614x709x1890	614x709x1890
Poids brut/net (kg)	71/65	90/84

ARMOIRES LABORATOIRE BIOMED +5°C

LFKU 1650 - 141 L - Porte pleine - référence 638702

LFKU 1653 - 141 L - Porte vitrée - référence 638700




LFKU 1653

LES PLUS PRODUITS




Système d'air canalisé avec double ventilateur axial et protections anti-congélation.

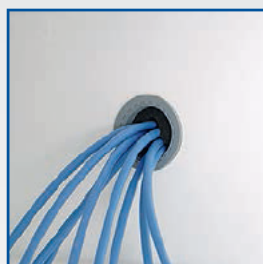

Passage de cuve Ø 30mm pour caractérisation/qualification sur site, positionné sur la porte à 1/3 du haut (pour chaque compartiment).



Passage cuve Ø 15 mm pour sonde GTC (Gestion Température Centralisée) - PT100 ou numérique.

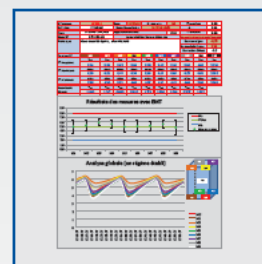

Chaque appareil est livré avec sa cartographie de contrôle et réglage 9 points. Caractérisation effectuée d'après la norme FD X15-140 en température d'air pour une ambiance de 22°C

DÉFINITION

- Refroidissement ventilé +5°C ± 2°C
- Dégivrage et évaporation des condensats automatique
- Plaque de protection de l'évaporateur anti-congélation
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis
- Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 55mm
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte
- Rappel de porte automatique
- Éclairage LED sur modèle avec porte vitrée
- Équipée de 3 grilles acier plastifié (478x420 mm), charge max 45kg, réglables en hauteur par pas de 32 mm

RÉGULATION

- Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de 0,1 °C
- Verrouillage du clavier sécurisé par code PIN
- Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables)
- Alarme ouverture de porte visuelle et sonore
- Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance
- Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec indication de la date de l'heure et de la durée
- Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec indication de la date de l'heure et de la durée
- Sauvegarde de la température mini et maxi
- Connexion série RS 485 pour traçabilité température et alarmes centralisée sur PC (via interface & logiciel en accessoire)
- Thermostat de sécurité anti-congélation à +2°C



ARMOIRES LABORATOIRE BIOMED +5°C - SUITE

Caractéristiques Standard


OPTIONS

- 626792: réglage de la température de consigne à +4°C ± 2°C
- 626791: réglage de la température de consigne à +6°C ± 2°C
- 626790: alarme + traçabilité autonome dans boîtier monté sur le dessus de l'appareil - (lxpxh) 150x60x100mm
- 626785: enregistreur à disques 7 jours monté dans boîtier laissé en attente avec câble 1,5m. - (lxpxh) 240x90x160mm


ACCESSOIRES

- Grille acier plastifié (lxp) 478x420 mm
- Tiroir aluminium télescopique
- Interface connexion RS485 + logiciel traçabilité
- Enregistreur mobile EJ 32 IN

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

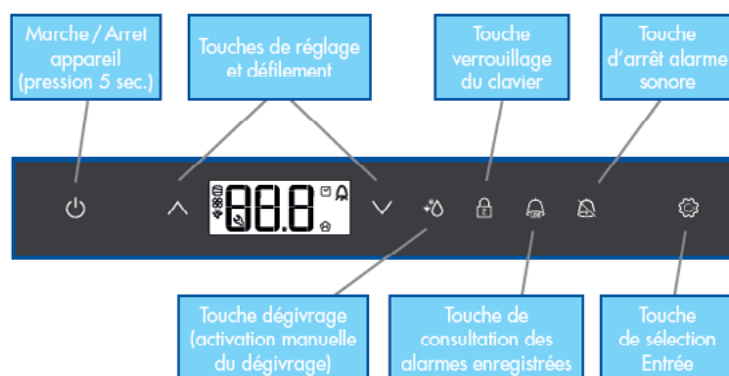

ERGONOMIE

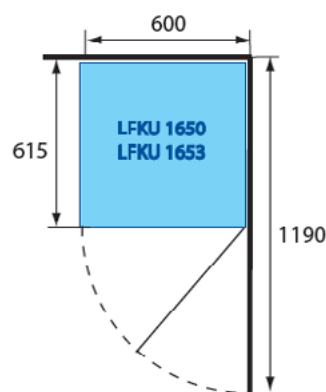

- Hauteur 820 mm - peut se placer sous paillasse
- Largeur réduite 600 mm
- Porte pleine ou vitrée, réversible avec serrure
- Rappel automatique à 45°, stable à 90°

Caractéristiques Technique

	638701	638703
Volume brut / utile (l.)	141/130	141/130
Homogénéité de la température ¹	+5° à ± 2 °C	+5° à ± 2 °C
Plage de réglage de la température	+3° à +16°C	+3° à +16°C
Résolution et réglage	0,1°C	0,1°C
Hygrométrie (%)	65-75	65-75
Refroidissement	ventilé	ventilé
Dégivrage	automatique	automatique
Évaporateur	arrière vertical	arrière vertical
Condenseur	statique	statique
Fluide	R600a	R600a
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	100	100
Consommation électrique (kWh/24h)	0,83	1,11
Dégagement calorifique (W/h)	170	200
Classe climatique	7 (+35°C)	7 (+35°C)
Niveau sonore (dBA)	47	47
Équipement		
Type	Grille acier plastifié	Grille acier plastifié
Nb/dimensions (lxp) (mm)	3/478x420	3/478x420
Nb max./Hauteur de réglage (mm)	11/32	11/32
Charge admissible par grille (kg)	45	45
Charge admissible par appareil (kg)	140	140
Dimensions / Poids		
Appareil (lxpxh) (mm)	600x615x820	600x615x820
Cuve (lxpxh) (mm)	440x435x670	440x435x670
Emballé (lxpxh) (mm)	614x709x905	614x709x905
Poids brut/net (kg)	39/37	46/43

ARMOIRES LABORATOIRE BIOMED +5°C

LFKv 3950 - 360 L - Porte pleine - référence 638743

LFKv 3953 - 360 L - Porte vitrée - référence 638742



LFKv 3950

LES PLUS PRODUITS




Système d'air canalisé avec double ventilateur axial et protections anti-congélation.



Passage de cuve diamètre 30 mm pour caractérisation et qualification sur site. Positionné sur le côté droit à 1/3 du haut.



Passage cuve Ø 15 mm pour sonde GTC (Gestion Température Centralisée) - PT100 ou numérique.

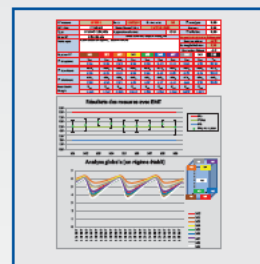

Chaque appareil est livré avec sa cartographie de contrôle et réglage 9 points. Caractérisation effectuée d'après la norme FD X15-140 en température d'air pour une ambiance de 22°C.

CONSTRUCTION

- Refroidissement ventilé +5°C ± 2°C
- Dégivrage et évaporation des condensats automatique
- Plaque de protection de l'évaporateur anti-congélation
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis
- Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 55mm
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte
- Rappel de porte automatique
- Éclairage LED sur modèle avec porte vitrée
- Équipée de 5 grilles acier plastifiées (478x420 mm), charge max 45kg, réglables en hauteur par pas de 32 mm

TECHNOLOGIE

- Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de 0,1 °C
- Verrouillage du clavier sécurisé par code PIN
- Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables)
- Alarme ouverture de porte visuelle et sonore
- Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance
- Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec indication de la date de l'heure et de la durée
- Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec indication de la date de l'heure et de la durée
- Sauvegarde de la température mini et maxi
- Connexion série RS 485 pour traçabilité température et alarmes centralisée sur PC (via interface & logiciel en accessoire)
- Thermostat de sécurité anti-congélation à +2°C


ARMOIRES LABORATOIRE BIOMED +5°C - SUITE

Caractéristiques Standard

OPTIONS

- 626792 : réglage de la température de consigne à $+4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
- 626791 : réglage de la température de consigne à $+6^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
- 626790 : alarme + traçabilité autonome dans boîtier monté sur le dessus de l'appareil - (lxpxh) 150x60x100mm
- 626785 : enregistreur à disques 7 jours monté dans boîtier laissé en attente avec câble 1,5m. - (lxpxh) 240x90x160mm


RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

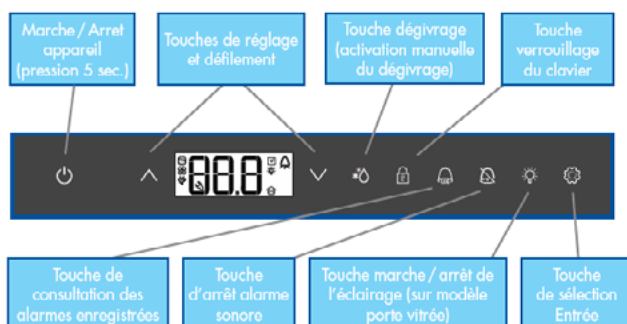

ACCESSOIRES

- Grille acier plastifié (lxp) 478x420 mm
- Tiror aluminium télescopique
- Interface connexion RS485 + logiciel traçabilité
- Enregistreur mobile EJ 32 IN

ERGONOMIE

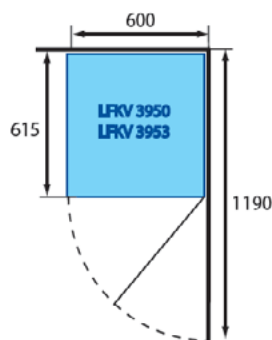

Largeur réduite 600 mm
Porte pleine ou vitrée, réversible avec serrure
Rappel automatique à 45° , stable à 90°

Caractéristiques Technique

	638743	638742
Volume brut / utile (l.)	360/344	360/344
Homogénéité de la température ¹	$+5^{\circ}$ à $\pm 2^{\circ}\text{C}$	$+5^{\circ}$ à $\pm 2^{\circ}\text{C}$
Plage de réglage de la température	$+3^{\circ}$ à $+16^{\circ}\text{C}$	$+3^{\circ}$ à $+16^{\circ}\text{C}$
Résolution et réglage	0,1°C	0,1°C
Hygrométrie (%)	65-75	65-75
Refroidissement	ventilé	ventilé
Dégivrage	automatique	automatique
Évaporateur	arrière vertical	arrière vertical
Condenseur	statique	statique
Fluide	R600a	R600a
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	130	150
Consommation électrique (kWh/24h)	0,94	1,45
Dégagement calorifique (W/h)	230	270
Classe climatique	7 (+35°C)	7 (+35°C)
Niveau sonore (dBA)	48	48
Équipement		
Type	Grille acier plastifié	Grille acier plastifié
Nb/dimensions (lxp) (mm)	5 / 478x420	5 / 478x420
Nb max./Hauteur de réglage (mm)	37 / 32	37 / 32
Charge admissible par grille (kg)	45	45
Charge admissible par appareil (kg)	210	210
Dimensions / Poids		
Appareil (lxpxh) (mm)	600x615x1840	600x615x1840
Cuve (lxpxh) (mm)	440x435x1635	440x435x1635
Emballé (lxpxh) (mm)	614x709x1890	614x709x1890
Poids brut/net (kg)	71/65	90/84

CONTACTEZ-NOUS AU 00 33 (1) 34 02 40 72

